


easy care




CE

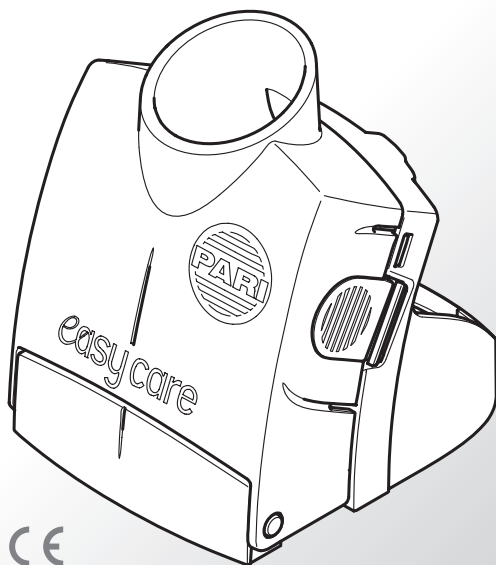

easycare

Equipo de limpieza para el generador de aerosol eFlow®

N.º ref. 078G6100

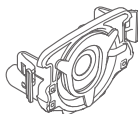


Antes de utilizar el producto por primera vez, lea **detenidamente y en su totalidad** las instrucciones de uso. Conserve estas instrucciones de uso cuidadosamente.

1 Descripción del producto

Equipo con frontal abatible para la limpieza del generador de aerosol eFlow® con tolva integrada y recipiente para 5 ml de solución salina isotónica (0,9%). Para el funcionamiento son necesarios el cable del nebulizador y la unidad de mando del equipo eFlow®. Consulte las indicaciones sobre la conexión de la unidad de mando a la corriente y el modo de empleo en las instrucciones de uso del equipo eFlow®.

Finalidad de uso

El equipo de limpieza easycare puede ayudar a acortar la duración de la nebulización en caso de que disminuya la potencia de nebulización del generador de aerosol eFlow®. El equipo easycare limpia mecánicamente los poros de la membrana del generador de aerosol eFlow® mediante un lavado por contracorriente.

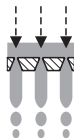

3 Advertencias importantes sobre el modo de uso

Se recomienda realizar una limpieza con el equipo easycare cuando la duración de la nebulización se prolongue notablemente utilizando la misma sustancia y la misma cantidad.

Encontrará más indicaciones en la versión actual de las instrucciones de uso del equipo eFlow®, en el capítulo “Detección de fallos” y buscando la expresión “Duración prolongada de la nebulización” (www.pari.de/Produkte/Pari-Inhalationsgeraete/eFlow).

Ejemplo con eFlow® rapid

- Mida la duración de la nebulización con 2,5 ml de solución salina isotónica (0,9%) sin inhalar.
- Si la duración de la nebulización supera los **4 minutos**, se recomienda realizar una limpieza con el equipo de limpieza easycare.



Frecuencia de uso

En caso necesario, un máximo de dos veces por semana tras la inhalación y tras la limpieza del generador de aerosol (consulte las instrucciones de limpieza más adelante).

Advertencia:

i Aumentar la frecuencia de uso **no** es beneficioso, sino que puede provocar un desgaste prematuro del material. Un generador de aerosol debería lavarse por contracorriente con el equipo de limpieza easycare un máximo de 25 veces a lo largo de toda su vida útil. El equipo de limpieza easycare no contribuye a alargar la vida útil del generador de aerosol.

Líquido de lavado por contracorriente

5 ml de solución salina isotónica (0,9%)

Instrucciones de limpieza

El lavado por contracorriente con el equipo easycare es una medida que se toma **adicionalmente** a la limpieza normal del generador de aerosol.



Realice el lavado por contracorriente con el equipo del siguiente modo y en el siguiente orden:

1. Limpie las piezas del nebulizador y el generador de aerosol *)
2. **Realice el lavado por contracorriente del generador de aerosol con easycare**
3. Desinfecte/esterilice las piezas del nebulizador y el generador de aerosol *)

*) Para los puntos 1 y 3, consulte el capítulo “Higiene” de las instrucciones de uso eFlow®.

4 Preparación y montaje

4.1 Apertura del equipo de limpieza easycare




- Para abrir, presione ligeramente los puntos de agarre laterales.
- Abra las dos partes.

4.2 Colocación del generador de aerosol y cierre del contenedor easycare




- El generador de aerosol eFlow® debe encajar de forma perceptible. Compruebe que lo ha orientado correctamente.
- Al cerrar compruebe que los ganchos laterales encajan de forma perceptible.

4.3 Conexión del equipo de limpieza easycare a la unidad de mando eFlow®

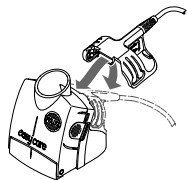

- Enchufe la conexión del cable del nebulizador eFlow® al eje de bisagra del contenedor easycare y bájela para que encajen los contactos metálicos.
- Conecte el otro extremo del cable a la unidad de mando eFlow®.

4.4 Llenado

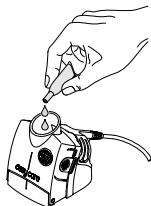

- Introduzca unos 5 ml de solución salina isotónica (0,9%) en la tolva del easycare.

5 Procedimiento de limpieza por contracorriente

5.1 Modo de empleo

- Inicie la limpieza por contracorriente accionando el botón de activación de la unidad de mando del eFlow®.
- El ciclo de limpieza con 5 ml dura al menos 10 minutos.

5.2 Finalización

Una vez finalizado el lavado, la unidad de mando eFlow® se apaga automáticamente. Si todavía queda líquido en la tolva vuelva a iniciar el ciclo.

● Advertencia:

- 1** Cuando finaliza el ciclo de lavado puede salir niebla de la tolva de llenado del easycare. Se trata de algo normal. La unidad de mando del eFlow® se puede desconectar entonces manualmente pulsando la tecla ON/OFF.

6 Desmontaje del equipo de limpieza easycare

- Desconecte el cable del nebulizador eFlow® del contenedor easycare y de la unidad de mando eFlow®.
- Abra el contenedor easycare y extraiga el generador de aerosol eFlow® presionando los dos ganchos laterales (consulte la información sobre la desinfección y esterilización del generador de aerosol en el capítulo “Higiene” de las instrucciones de uso eFlow®).
- Deseche la solución de lavado del contenedor easycare.

7 Limpieza del equipo easycare

Después del uso, limpie el producto con agua corriente y un lavavajillas. A continuación, séquelo bien y guárdelo abierto y en posición invertida sobre una superficie limpia.